


CLEVERE LÖSUNGEN ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN



## VERBRAUCHSMATERIAL FÜR *Cellspin*<sup>®</sup> ZYTOZENTRIFUGEN

> Kompatibel mit Shandon™ Cytospin™

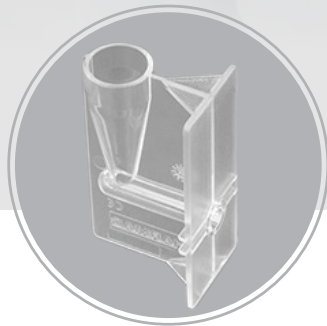


# VERBRAUCHSMATERIAL

## DAS CLEVERE DETAIL MACHT DEN UNTERSCHIED

### THARMAC® Präparationssysteme für die Zytocentrifugation


THARMAC® bietet Ihnen eine große Auswahl an hochentwickelten Präparationssystemen, mit denen Sie jede zytologische Präparation schnell und zuverlässig durchführen können. Die Einzelkomponenten stecken voller cleverer Details und sind alle bestmöglich aufeinander abgestimmt. Damit machen unsere Gesamtsysteme Ihren Laboralltag einfacher und sicherer.

#### THARMAC® CELLCLIP

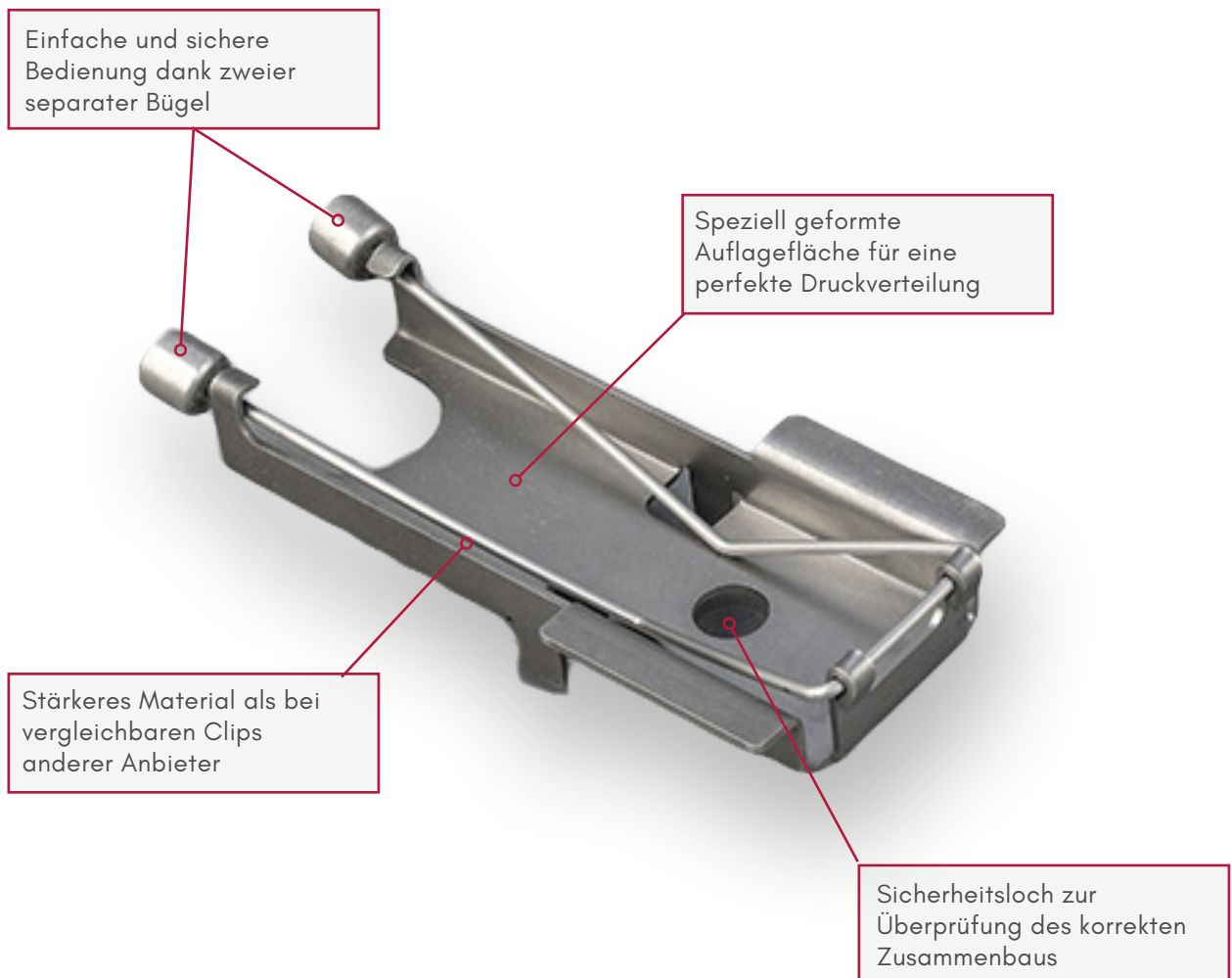

# PRÄPARATIONSSYSTEME

## THARMAC® CELLFUNNEL®

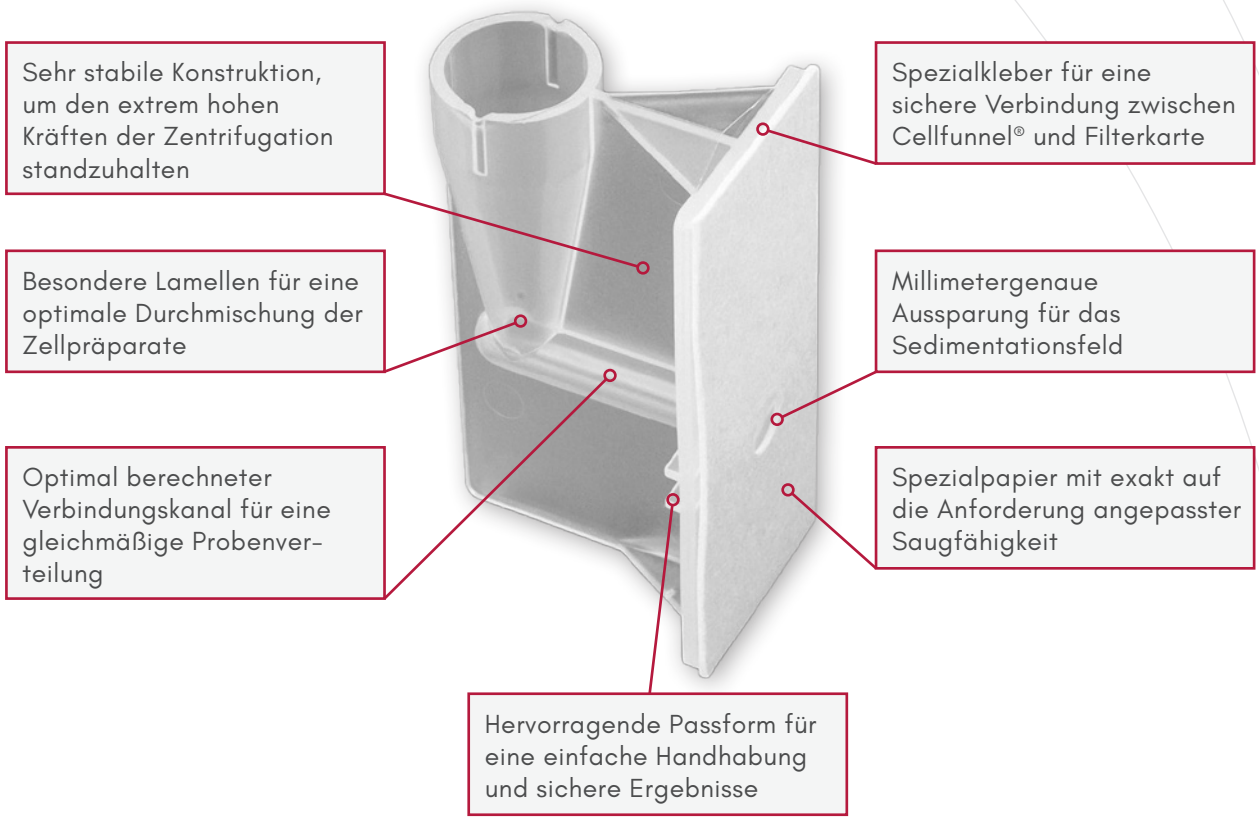

Sehr stabile Konstruktion, um den extrem hohen Kräften der Zentrifugation standzuhalten

Spezialkleber für eine sichere Verbindung zwischen Cellfunnel® und Filterkarte

Besondere Lamellen für eine optimale Durchmischung der Zellpräparate

Millimetergenaue Aussparung für das Sedimentationsfeld

Optimal berechneter Verbindungskanal für eine gleichmäßige Probenverteilung

Spezialpapier mit exakt auf die Anforderung angepasster Saugfähigkeit

Hervorragende Passform für eine einfache Handhabung und sichere Ergebnisse

Die Abbildung oben zeigt das Einweg-Single Cellfunnel® (Art.-Nr. 320-100 bzw. 320-500). THARMAC® bietet auch Double Cellfunnel® und ECOfunnel® an. Alle Systeme sind als Ein- und Mehrweg verfügbar und auch passend für Shandon™ Cytospin™ - Probenvolumen von 0,1 - 5 ml.



**Double Cellfunnel®**, Mehrweg



**ECOfunnel®**, Einweg

# PRÄPARATIONSSYSTEME

## THARMAC® CYTOTRÄGER

Passend für alle gängigen Färbeautomaten!

Weiβes Feld zur einfachen Beschriftung und eindeutigen Identifizierung

Spezielle Oberflächenstruktur für bessere Zellanhaftung

Wahlweise mit Spezialbeschichtung für nochmals bessere Zellanhaftung

Erhabener Kreis für eine leichtere Probenauffindbarkeit

Abgerundete Ecken und Kanten für mehr Sicherheit

**Auch mit zwei Kreisen oder einem Rechteck erhältlich:**

## THARMAC® FILTERKARTEN

Spezialpapier mit exakt auf die Anforderung angepasster Saugfähigkeit

Millimetergenaue Aussparung für das Sedimentationsfeld

**Auch mit zwei Kreisen oder einem Rechteck erhältlich:**

Exakt zugeschnittene Länge, damit das Beschriftungsfeld der THARMAC® Cytoträger immer sichtbar ist – auch im montierten System!

# PRÄPARATIONSSYSTEME

Zubehör und Verbrauchsmaterial für die THARMAC®  
*Cellspin*®-Familie und für Shandon™ Cytospin™

05

VERBRAUCHSMATERIAL

## Für *Cellspin*®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
302-1	CellClip Edelstahlclip für <i>Cellspin</i> ® CellClip-Rotor	1
102-1	Dichtung für geschlossenen <i>Cellspin</i> ® CellClip-Rotor	1

## Für Shandon™ Cytospin™ & *Cellspin*® Easy Rotor

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
390-1	Edelstahlclip	1
406-12	TPX-Funnel®	12
407-200	Filterkarten für TPX-Funnel® (Art-Nr. 406)	200



Bei den nachfolgenden Verbrauchsmaterialien von THARMAC® können Sie wählen zwischen der umweltfreundlichen Mehrweglösung oder einer unkomplizierten Einwegvariante.  
**Alle Systeme sind kompatibel mit Shandon™ Cytospin™.**

## Single Cellfunnel® | MEHRWEG

- › Probenvolumen: bis 0,5 ml
- › Sedimentationsfeld: 1 Feld, rund, 6 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
304-12	Single Cellfunnel®, wiederverwendbar, nur für Art.-Nr. 305 und 326	12
305-200	Filterkarten nur für Art.-Nr. 304	200
326-200	Filterkarten dünn (Typ braun), für Proben ≤ 0,4 ml	200
310-100	Cytoträger, unbeschichtet, ein Kreis	100
311-100	Cytoträger, beschichtet, ein Kreis	100

**Single Cellfunnel® | EINWEG**

- › Probenvolumen: bis 0,5 ml
- › Sedimentationsfeld: 1 Feld, rund, 6 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
320-100	Single Cellfunnel® Einweg, mit fest montierter Filterkarte, nur für Art.-Nr. 310 und 311	100
320-500	Single Cellfunnel® Einweg, mit fest montierter Filterkarte, nur für Art.-Nr. 310 und 311	500
1393-40	EASY Single Cellfunnel® Einweg*, mit weißer Filterkarte, nur für Art.-Nr. 310 und 311	40
1393-200	EASY Single Cellfunnel® Einweg*, mit weißer Filterkarte, nur für Art.-Nr. 310 und 311	200
1394-40	EASY Single Cellfunnel® Einweg*, mit brauner Filterkarte für Proben ≤ 0,4 ml, nur für Art.-Nr. 310 und 311	40
1394-200	EASY Single Cellfunnel® Einweg*, mit brauner Filterkarte für Proben ≤ 0.4 ml, nur für Art.-Nr. 310 und 311	200
310-100	Cytoträger, unbeschichtet, ein Kreis	100
311-100	Cytoträger, beschichtet, ein Kreis	100

**Double Cellfunnel® | MEHRWEG**

- › Probenvolumen: bis 2x 0,5 ml
- › Sedimentationsfeld: 2 Felder, rund, je 6 mm Durchmesser
- › Ideal für immunchemische Untersuchungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
306-12	Double Cellfunnel®, wiederverwendbar, für zwei Proben, nur für Art.-Nr. 307, 309	12
307-500	Filterkarten, nur für Art.-Nr. 306	500
309-100	Cytoträger, unbeschichtet, zwei Kreise, nur für Art.-Nr. 306	100

\*Passend NUR für *Cellspin*® EASY-Rotoren und Shandon™ Cytospin™

**Double Cellfunnel® | EINWEG**

- Probenvolumen: bis 2x 0,5 ml
- Sedimentationsfeld: 2 Felder, rund, je 6 mm Durchmesser
- Ideal für immunchemische Untersuchungen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
323-100	Double Cellfunnel® Einweg, mit zwei versetzten Löchern und fest montierter Filterkarte, nur für Art.-Nr. 316 oder 317	100
323-500	Double Cellfunnel® Einweg, mit zwei versetzten Löchern und fest montierter Filterkarte, nur für Art.-Nr. 316 oder 317	500
1395-40	EASY Double Cellfunnel® Einweg*, mit zwei versetzten Löchern, mit weißer Filterkarte, nur für Art.-Nr. 316 oder 317	40
1395-200	EASY Double Cellfunnel® Einweg*, mit zwei versetzten Löchern, mit weißer Filterkarte, nur für Art.-Nr. 316 oder 317	200
316-100	Cytoträger, beschichtet, zwei versetzte Kreise, nur für Art.-Nr. 323 und 1395	100
317-100	Cytoträger, unbeschichtet, zwei versetzte Kreise, nur für Art.-Nr. 323 und 1395	100

**ECOfunnel® | MEHRWEG**

- Probenvolumen: bis 5 ml
- Sedimentationsfeld: 1 Feld, rechteckig, 22 x 15 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
313-12	ECOfunnel®, wiederverwendbar, nur für Art.-Nr. 314, 315, 345	12
314-100	ECOträger, beschichtet	100
315-100	ECOdicht Dichtung, für ECOfunnel® Art.-Nr. 313	100
345-100	Filterkarten, für ECOfunnel® Art.-Nr. 313 für Proben ≤ 0,5 ml	100
345-500	Filterkarten, für ECOfunnel®-Art.-Nr. 313 für Proben ≤ 0,5 ml	500

**ECOfunnel® | EINWEG**

- Probenvolumen: bis 5 ml
- Sedimentationsfeld: 1 Feld, rechteckig, 22 x 15 mm
- Mit fest montiertem ECOdicht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk. je Box
322-100	ECOfunnel® Einweg, nur für Art.-Nr. 314	100
322-500	ECOfunnel® Einweg, nur für Art.-Nr. 314	500
314-100	ECOträger, beschichtet	100
1391-40	EASY ECOfunnel® Einweg*, inklusive ECOträgern 314	40
1391-200	EASY ECOfunnel® Einweg*, inklusive ECOträgern 314	200

\*Passend NUR für *Cellspin*® EASY-Rotoren und Shandon™ Cytospin™





**THARMAC® GmbH Laboratory Solutions**

**Betriebsstätte**

Hasselborner Straße 19-21 » DE-35647 Waldsolms » FON: +49 (0) 6085 98 99 1-0  
FAX: +49 (0) 6085 98 99 1-19 » MAIL: info@tharmac.de

**Geschäftssitz**

Borsigstraße 7A » DE-65205 Wiesbaden » FON: +49 (0) 6122 5 88 97-33  
FAX: +49 (0) 6122 5 88 97-36 » MAIL: info@tharmac.de